

Antigen snabbtest covid-19 (SARS-CoV-2)- PMO/ Avd Cov-19 Snabb Ag-Melior Roche

Testprocedur



1. Ta fram det du behöver för att utföra testen:
Testkit + timer + behållare för smittförande avfall.
Ta ut testkassetten ur foliepåsen och lägg den på en plan och ren yta.
Märk både rör och testkassett med patientens ID.




2. Provtagning från nasofarynx:
Följ Vårdhygiens riktlinjer för skyddsutrustning vid provtagning [Välj rätt skyddsutrustning](#).

Använd provtagningspinnen som följer med kitet.

- Tryck patientens nästipp uppåt för att se bättre.
- För in pinnen genom ena näsöppningen, horisontellt långt in längs näsbotten tills du känner att pinnen har nått nasofarynx, i höjd med ytterörat.
- Snurra pinnen 1 varv och låt den vara kvar 5 sekunder.
- Dra pinnen rakt ut med en jämn rörelse utan att vidröra huden i näsöppningen.

Läs mer på Vardhandboken.se.

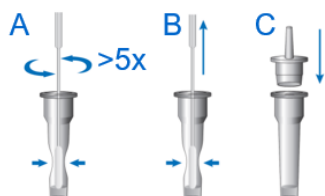

3. Sätt ner pinnen i röret så att tippen kommer ner i vätskan.
För att få ut så mycket som möjligt av provmaterialet ner i vätskan roterar du pinnen minst fem gånger och tryck spetsen mot rörets vägg.
Dra sen upp pinnen så långt att du kan krama ur dess spets genom att trycka med fingrarna på provrörets yttersida.


Ta upp pinnen och kasta i behållare för smittförande avfall.
Sätt på den medföljande korken så att röret försluts ordentligt.

ANVISNING



4. Droppa **3 droppar** ner i den runda brunnen på testkassetten. Viktigt att hålla röret vertikalt!
 Hantera eller flytta inte testkassetten förrän testet är utfört och avläst.
 Kasta röret i behållare för smittförande avfall.
 Sätt timern på 15 minuter. Anteckna tid för teststart, ex på testkassetten. Läs av testresultatet direkt när tiden är ute. Anteckna testresultatet. Avläsning får EJ göras efter 30 minuter.
 - Om testet är **Positivt** syns två band, ett vid T (test) och ett vid C (kontroll). Även ett svagt band vid T räknas som positivt resultat.
 - Om testet är **Negativt** syns endast ett band vid C, kontrollstrecket.
 - Om testet inte visar ett kontrollstreck vid C, är testet **ogiltigt (Ej bedömbart)**.

Kasta testkassetten i behållare för smittförande avfall.

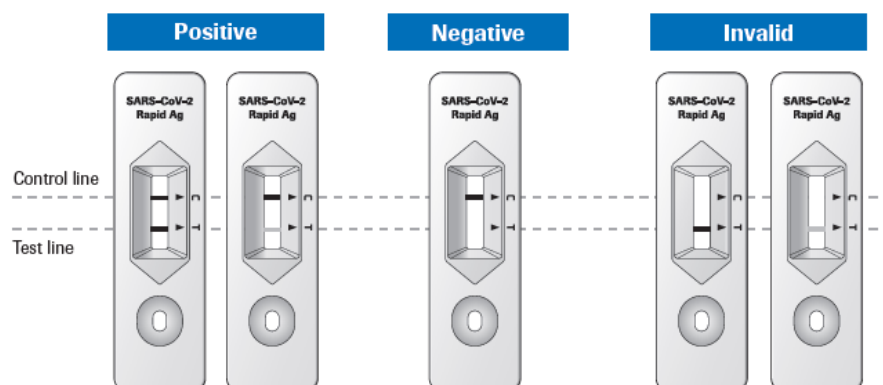

Utförlig information hittar ni i bruksanvisningen. Läs ALLTID bruksanvisningen innan du gör testet för första gången.

I Analysportalen ([SARS-CoV-2 \(SARS-coronavirus-2\) Antigen-påvisning \(PNA\)](#)) kan du läsa mer om användningsområden, indikationer, metodens prestanda och analysprincip.

Resultatregistrering

Två analyser är valbara

- I Melior:
 - Avd Cov-19 Snabb Ag – väljs när provet tas på patient
 - PERS Cov-19 Snabb Ag – väljs när provet tas på personal
- I PMO:
 - Antigen snabbtest covid-19 (SARS-CoV-2) – väljs när provet tas på patient
 - Antigen snabbtest covid-19 (SARS-CoV-2) Personal – väljs när provet tas på personal

All provsvar ska registreras i Melior eller PMO enligt instruktion på sid 4-8. Det är oerhört viktigt att alla resultat registreras, även ett ogiltigt (Ej bedömbart) resultat, då det ligger till grund för bland annat statistiken.

Det är av yttersta vikt att resultatet registreras med korrekt benämning. Skriv in exakt rätt ord:

Positivt

Negativt

Ej bedömbart

Om man fyller i felaktigt kommer verksamheten att bli kontaktad så att man får korrigera felet.

Alla positiva svar ska meddelas direkt till patienten, alternativt via telefon.

Både positiva och negativa svar ska dokumenteras i aktuell journalanteckning så att patienten kan läsa svaret via 1177.se.

Covid-19 är en anmälningspliktig sjukdom och vid positivt resultat på testet måste smittskyddsanmälan göras.

Smittskyddsanmälan består av en klinisk anmälan och en laboratorieanmälan.

Medicinskt ansvarig läkare gör en klinisk anmälan och laboratorieanmälan görs automatiskt via inmatat värde i journalsystemets lablista.

Kvalitetskontroller

Extern kvalitetssäkring:


Alla som använder PNA (patientnära analys) för SARS-CoV-2 ska delta i Equalis kvalitetssäkringsprogram för snabbdiagnostik av SARS-CoV-2, antigen.

<https://www.equalis.se/sv/nyheter/kvalitetssakringsprogram-for-snabbdiagnostik-av-sars-cov-2-antigen/>

Registrering i Melior

Ordinera och skriva in svar på analysen **Avd Cov-19 Snabb Ag** (provtagning patient) eller **PERS Cov-19 Snabb Ag** (provtagning personal) på labblistan i Melior


Börja med att klicka på den röda listan som heter **Avd Regio**. Denna är placerad direkt efter de blåa listorna. Tryck därefter på knappen Nytt. Välj ansvarig och tryck på OK.

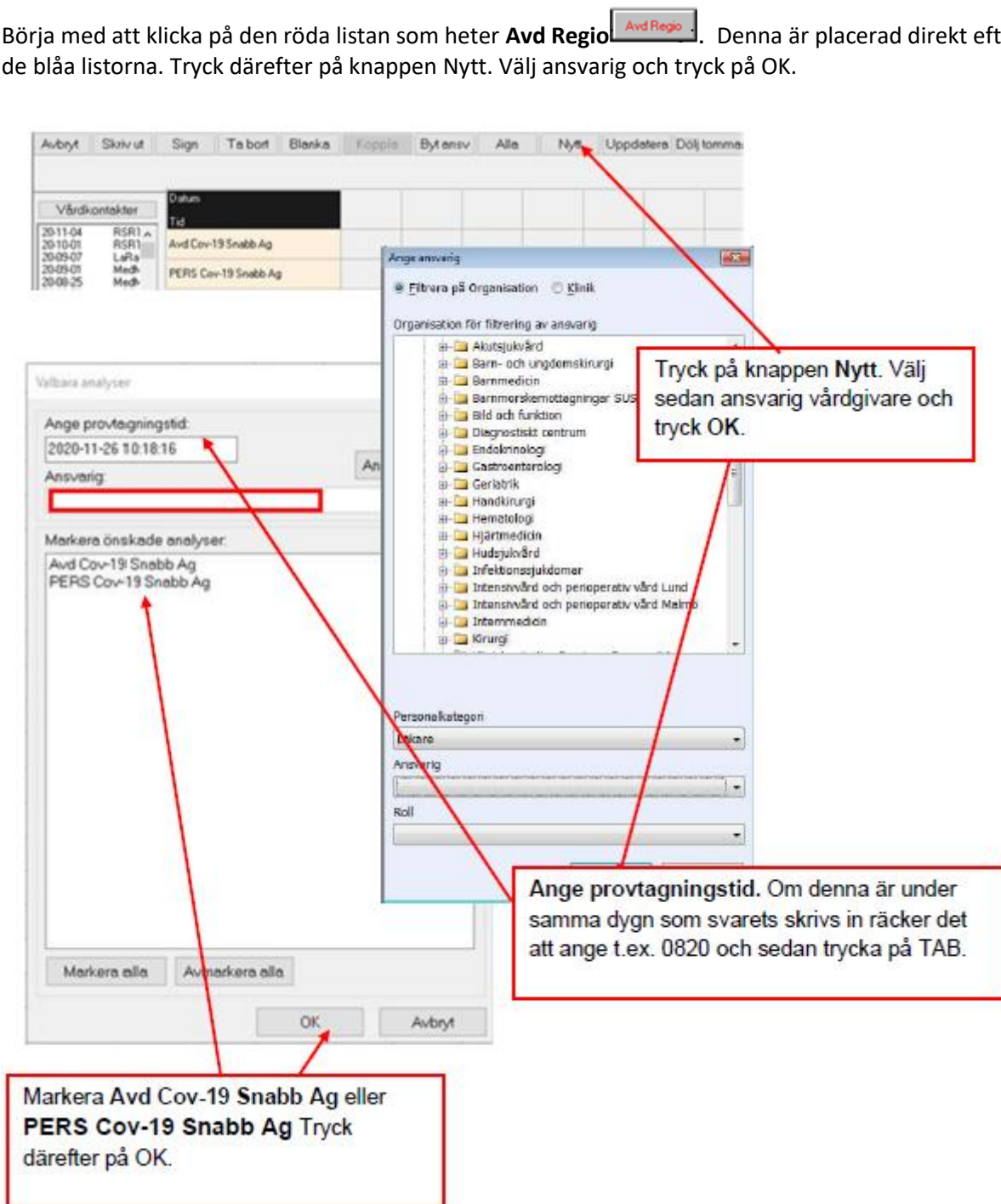

Tryck på knappen Nytt. Välj sedan ansvarig vårdgivare och tryck OK.

Ange provtagningstid. Om denna är under samma dygn som svarets skrivs in räcker det att ange t.ex. 0820 och sedan trycka på TAB.

Markera Avd Cov-19 Snabb Ag eller PERS Cov-19 Snabb Ag Tryck därefter på OK.

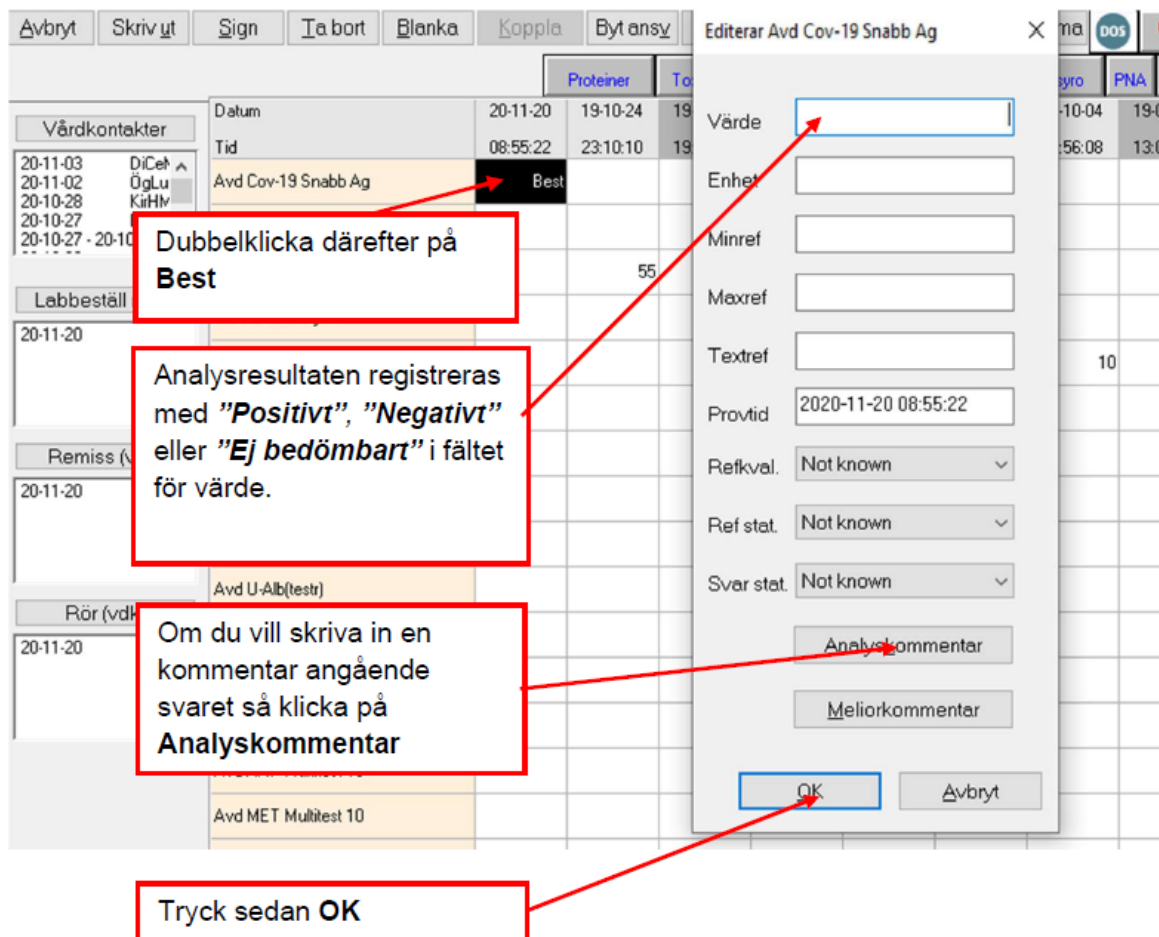

The screenshot shows a software interface for editing COVID-19 test results. A red box highlights the 'Best' button in the main table, with an annotation: 'Dubbelklicka därefter på Best'. Another red box points to the 'Analyskommentar' field in the editor, with an annotation: 'Om du vill skriva in en kommentar angående svaret så klicka på Analyskommentar'. A third red box points to the 'OK' button at the bottom of the editor, with an annotation: 'Tryck sedan OK'. A fourth red box points to the 'Värde' field in the editor, with an annotation: 'Analysresultaten registreras med "Positivt", "Negativt" eller "Ej bedömbart" i fältet för värde.'.

Editor Avd Cov-19 Snabb Ag

Värde:

Enhet:

Minref:

Maxref:

Textref:

Provtid: 2020-11-20 08:55:22

Refkval: Not known

Ref stat: Not known

Svar stat: Not known

Analyskommentar

Meliorkommentar


OK Avbryt

Registrering i PMO

Antigen snabbtest ligger i *Lokalt lab – Lokala analyser*. Det finns två analyser för antigen snabbtest, en för patienter och en för personal, det är viktigt att du väljer rätt.


- *Antigen snabbtest covid-19 (SARS-CoV-2)*
- *Antigen snabbtest covid-19 (SARS-CoV-2) Personal*

I analysrutan kan du via beskrivningsrutan längst ner se den vilken som är markerad.

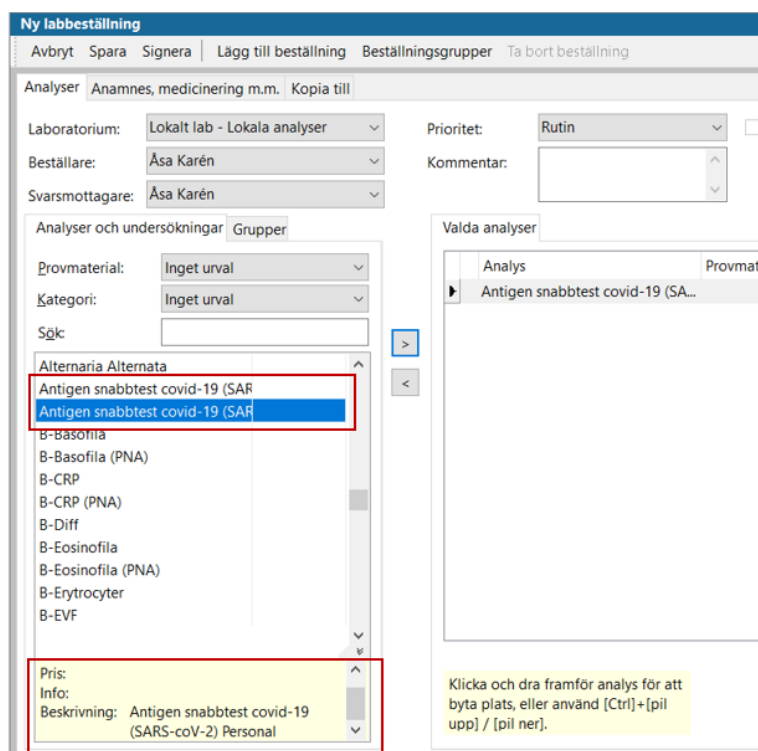

Inmatning av resultat


Markera analysen och välj *Resultat – Enkel inmatning*.

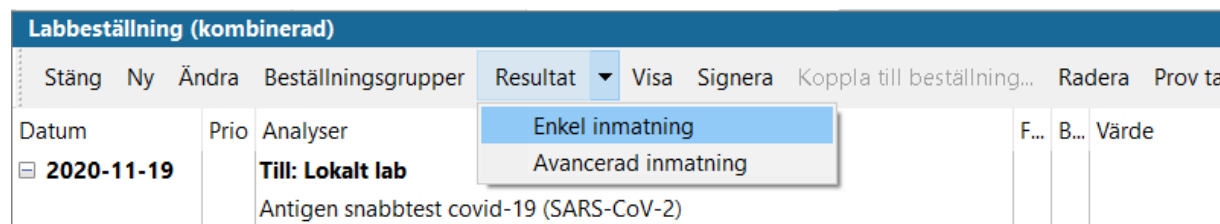

Positivt utfall

Positivt resultat skrivs in i rutan för *Resultat* och markeras med patologiskt "Ja".

OBS! Det är mycket viktigt att markera patologiskt "Ja" eftersom det triggar funktionen för automatisk överföring till Laboratorieanmälan hos SmiNet.

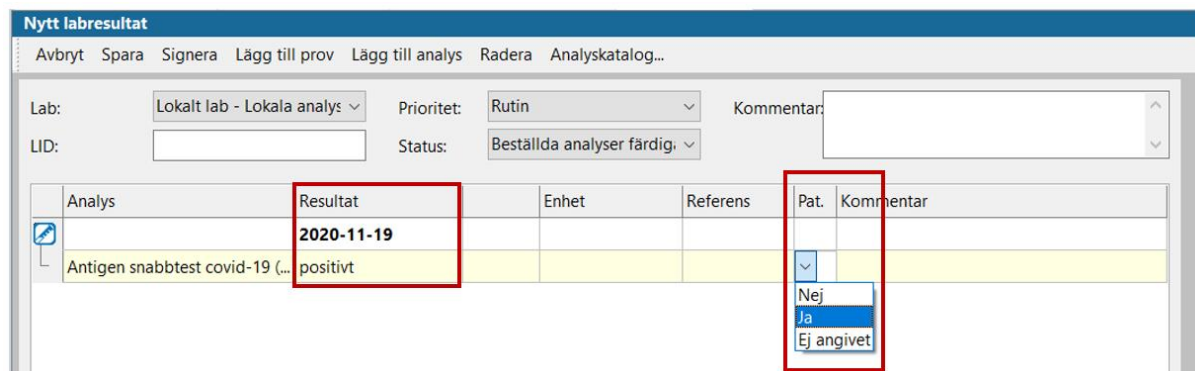

The screenshot shows the 'Nytt labresultat' form. The 'Pat.' dropdown menu is open, showing the following options: 'Nej', 'Ja', and 'Ej angivet'. The 'Ja' option is highlighted. The form also shows fields for 'Lab:', 'LID:', 'Prioritet:', 'Status:', and 'Kommentar:'.

Patologiskt "Ja" rödmarkerar även provsvaret i Labresultat för ökad synlighet.

Labresultat									
Stäng Ny ▼ Ändra ▼ Visa Signera Koppla till beställning... Koppla isär Radera Tidsserie Inställningar...									
Provdatum	Prio	Prov, lokalisation, undersökning	Värde	Referens	B...	Be...	Init	Si...	Kommentar
2020-11-19		Resultat från Lokalt lab				✓	ASA		
		*Antigen snabbtest covid-19 (SAR... positivt							

Vid positivt resultat ska patienten kontaktas via telefon av hälso- och sjukvårdspersonal och dokumenteras i PMO.

Observera att dokumentation i Anteckning blir synlig i eJournal på 1177 när du sparar anteckningen.

Negativt utfall

Resultatet skrivs in enligt samma princip som ovan manuellt i rutan för resultat, då med ett negativt värde.

Labbeställning (kombinerad)															
Stäng		Ny	Ändra	Beställningsgrupper	Resultat	Visa	Signera	Koppla till beställning...	Radera	Prov taget	Tidsserie	Inställningar...	Endast beställ		
Datum	Prio	Analyser						F...	B...	Varde	Referens	Status	Init	Si...	Öns
2020-11-19		Till: Lokalt lab											ASA		
2020-11-19		Antigen snabbtest covid-19 (SARS-CoV-2)								negativt		*Beställda a...			

Negativt resultat dokumenteras i Anteckning som patienten kan ta del av via eJournal på 1177. Observera att dokumentation i Anteckning blir synlig i eJournal på 1177 när du sparar anteckningen.

Ej bedömbart

Om det inte går att utläsa något resultat markeras analysen med *Ej bedömbart*.

Labbeställning (kombinerad)												
Stäng	Ny	Ändra	Beställningsgrupper	Resultat	Visa	Signera	Koppla till beställning...	Radera	Prov taget	Tidsserie	Inställ	
Datum	Prio	Analyser					F...	B...	Värde	Referens	Status	
2020-11-12		Till: Lokalt lab										
2020-11-12		Antigen snabbtest covid-19 (SARS-CoV-2)							Ej bedömbart		*Beställda a.	

Klinisk anmälan

Vid positivt resultat ska elektronisk Smittskyddsanmälan göras av ansvarig läkare.

<http://www.sminet.se/>

För elektronisk anmälan krävs lösenord som du får av Smittskydd Skåne. All information hittar du via länken

<https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/smittskydd/#26198>