


Registrera manuella provsvar där PNA-svar redan finns

När man på lokalt lab beställer en kombination av patientnära analyser (PNA) och analyser som förs in manuellt (se exemplet nedan) kan det uppstå problem ifall PNA-svaren förs in innan man hunnit föra in det manuella svaret. Problemet uppstår för att PNA sätter status Slutsvaret när svaren inkommit och herefter kan man inte lägga in det manuella svaret på vanligt vis.


Gör så här för att kringgå problemet:

1. Markera beställningen och klicka på Visa.

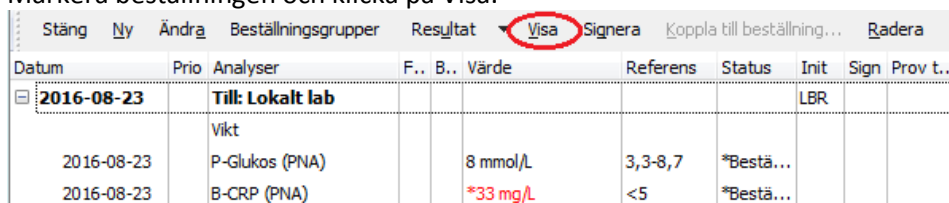

Datum	Prio	Analys	F.. B..	Värde	Referens	Status	Init	Sign	Prov t..
2016-08-23		Till: Lokalt lab					LBR		
		Vikt							
2016-08-23		P-Glukos (PNA)		8 mmol/L	3,3-8,7	*Bestä...			
2016-08-23		B-CRP (PNA)		*33 mg/L	<5	*Bestä...			

2. Markera Beställning i Urvalspanelen.

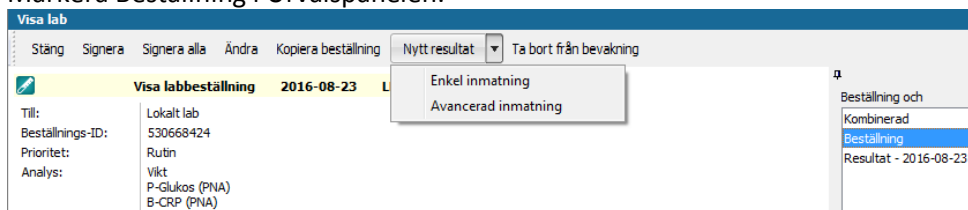

Visa lab

Stäng Signera Signera alla Ändra Kopiera beställning Nytt resultat Ta bort från bevakning


Visa labbeställning 2016-08-23

Till: Lokalt lab
 Beställnings-ID: 530668424
 Prioritet: Rutin
 Analys: Vikt, P-Glukos (PNA), B-CRP (PNA)

Nytt resultat: Enkel inmatning, Avancerad inmatning

Beställning och: Kombinerad, Beställning, Resultat - 2016-08-23

3. Klicka på Nytt resultat i menyraden och välj Enkel inmatning
4. Skriv in svaret på den analys du har analyserat själv
5. Markera de övriga analyserna som du redan har fått svar på från PNA (i exemplet P-Glukos (PNA) och B-CRP (PNA)) och radera dem en och en – förklaring finns på nästa sida

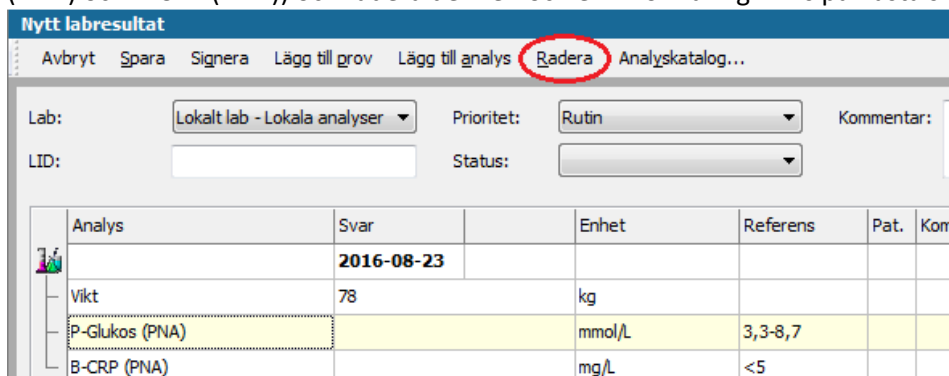

Nytt labresultat

Avbryt Spara Signera Lägg till prov Lägg till analys Radera Analyskatalog...

Lab: Lokalt lab - Lokala analyser Prioritet: Rutin Kommentar:

LID: Status:

Analys	Svar	Enhet	Referens	Pat.	Korr
	2016-08-23				
Vikt	78	kg			
P-Glukos (PNA)		mmol/L	3,3-8,7		
B-CRP (PNA)		mg/L	<5		

6. Ändra status till Beställda analyser färdiga
7. Spara.

Observera

Om du inte utför punkt 5 (på föregående sida) kommer det, i modulen Labresultat, se ut som om det finns två beställningar varav den ena inte är besvarad.

Labresultat									
Stäng	Ny	Ändra	Visa	Signera	Koppla till beställning...	Koppla isär...	Radera	Tidsserie	Inställningar...
Provdatum	Prio	Prov, lokalisation, undersökning	Värde	Referens	B...	Init	Sign	Kommentar	
2016-08-23		Resultat från Lokalt lab			✓	LBR			
		Vikt	78 kg						
		P-Glukos (PNA)	mmol/L	3,3-8,7					
		B-CRP (PNA)	mg/L	<5					
2016-08-23		Resultat från Lokalt lab			✓	LBR			
		Vikt	kg						
		P-Glukos (PNA)	8 mmol/L	3,3-8,7					
		*B-CRP (PNA)	33 mg/L	<5					

I Tidsserien ser man inte heller resultatet för att det ligger ett tomt svar framför!

Exempel där man **inte** gjort punkt 5

Tidsserie			
Stäng	Visa	Graf	Inställningar...
✓		2016-02-09	2016-08-23
Lablista bas			
Vikt	55	78	
CRP			
P-Glukos	*9		
B-Hb (PNA)	*130		
U-Albumin	0		
Phadiatop			

Exempel där man **har** gjort punkt 5

Tidsserie			
Stäng	Visa	Graf	Inställningar...
✓		2016-02-09	2016-08-23
Lablista bas			
Vikt	55	78	
CRP		*33	
P-Glukos	*9	8	
B-Hb (PNA)	*130		
U-Albumin	0		
Phadiatop			