

## Innehållsförteckning

Transport av prov inom sjukhusområdet via Regionservice (gäller ej sjukhusområdet Malmö) ..	2
Transport av prov inom Malmö sjukhusområde via Regionservice .....	3
När du bär provet själv till Laboratoriemedicin.....	4

## Transport av prov inom sjukhusområdet via Regionservice (gäller ej sjukhusområdet Malmö)

### Från:

Vårdenhet inom sjukhusområdet →

### Till:

Laboratoriemedicin vid sjukhusområdet

- Använd rörpost om det finns tillgängligt. Se "Transport i rörpost".
- Använd transporthylsa om så anges i Analysportalen.
- Beakta provets hållbarhet i rumstemperatur innan det placeras i provskåpet. Se Analysportalen på Vårdgivare Skåne under Laboratoriemedicin.
- Ställ urinodlingar i boxen högst 30 minuter före hämtning.
- Placera proverna i provrörställ till:
  - o Klinisk kemi längst fram
  - o Klinisk immunologi i mitten
  - o Klinisk mikrobiologi längst bak
- Sätt skrymmande prover bredvid provrörstållet.

Blodgrupperingar och förenlighetstester skickas direkt till transfusionsmedicin.

**OBS!** Ställ inga prov i skåpet efter sista hämtningen för dagen.



Remisser

Prov till:

Klinisk mikrobiologi

Klinisk immunologi

Laboratoriemedicin

Bas/Klinisk kemi

## Transport av prov inom Malmö sjukhusområde via Regionservice

### Från:

Vårdenhet inom sjukhusområdet Malmö

### Till:

Laboratoriemedicin vid sjukhusområdet Malmö

Använd rörpost om det finns tillgängligt. Se "Transport i rörpost".

Använd transporthylsa om så anges i Analysportalen.

Transportförpackningen skall alltid vara komplett och består av wellpapplåda med absorbent och inredning. Remisserna ska förvaras åtskilda från proven i särskilt fack.

Regionservice hämtar provlåda/or och lämnar samtidigt samma antal tomma lådor. Lägg inga lådor på lager.

Tänk på att:

- Vända remisslådans håll mot framkanten.
- Använda rörförlängare till korta kapillärrör eller stoppa rören i ett större rör.
- Skruva åt alla korkar ordentligt på burkar och rör.



### Låda till Klinisk kemi och Klinisk immunologi

- Sortera proven i lådan enligt skiss.
- Lägg remisser till Klinisk immunologi samt icke dataremiss till Klinisk kemi överst.
- Transportera i rumstemperatur 20-24°C.


Blodgrupperingar och förenlighetstester skickas direkt till Transfusionsmedicin.

### Låda till Klinisk mikrobiologi

- Blododlingar, provrör och burkar läggs i egen låda märkt Klinisk mikrobiologi.

### Låda till Klinisk patologi och cytologi

- Transportera i rumstemperatur ca 20-24°C.

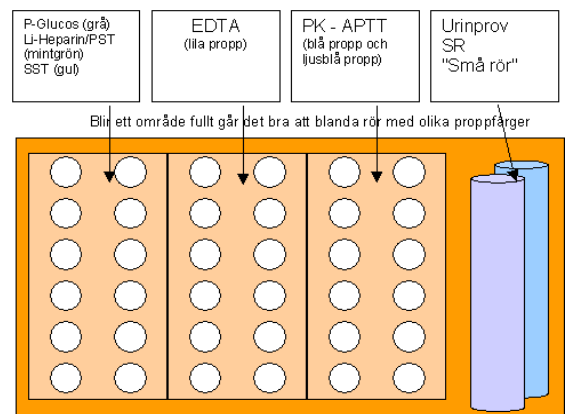

## När du bär provet själv till Laboratoriemedicin

**Från:**

Provtagning



**Till:**

Laboratoriemedicin

---

Packa proven i någon form av transportbox eller kuvert/påse så att proidentitet och remiss skyddas från insyn.

Olika transporthylsor och transportset finns att hitta i produktkatalogen  
LAB provtagningsmaterial på Vårdgivare Skåne/Patientadministration/Produktkataloger.