

## تعليمات للمريض


### عنية من البراز لعمل زراعة

هذا هو ما تحتاج إليه  
سوف تتسلم شنتمة أدوات الاختبار من مزود الرعاية الخاص بك. ورق تجميع العينة أو وعاء تم تنظيفه بعناية.


#### كيفية أخذ المسحة

تجنب تجفيف نفسك بعد التغوط، أو قم بجمع البراز على ورقة / في وعاء نظيف جداً. يراعى الالتزام بالفترات الزمنية لأخذ العينات المحددة من قبل مزود الخدمة الخاص بك.

أخرج الأنبوب والقطيلة الماسحة من العبوة. فكّ غطاء الأنبوب. يحتوي الأنبوب على سائل غير ضار. يجب أن يظل السائل داخل الأنبوب.

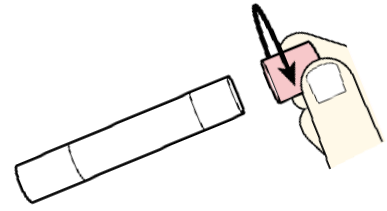


أدخل القطيلة الماسحة في فتحة الشرج بعد التغوط مباشرة، أو اغمس القطيلة في براز تم تجميعه. يجب التأكد من وجود براز على القطيلة.

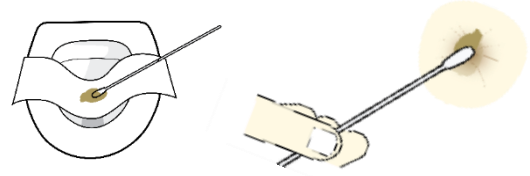


ضع القطيلة داخل الأنبوب.

اطوي القطيلة من مكان التحزيز.

أعد إحكام غلق غطاء الأنبوب مرة أخرى بعناية.

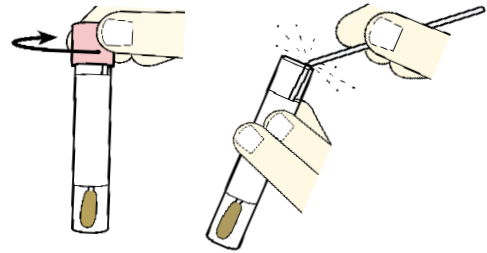

الصق شريط البيانات على الأنبوب مدوناً عليه رقم تحقيق الشخصية والاسم، وتوقيت وتاريخ أخذ العينة. استخدم شريط البيانات المُعطى لك من قبل مزود الخدمة الخاص بك.

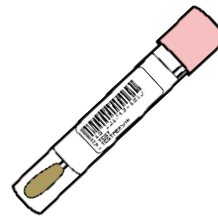

تُسَلَّم العينة إلى مزود الخدمة الخاص بك في نفس يوم أخذ العينة بحد أقصى. تُنقل العينة داخل كيس بلاستيك به ثلج. احضر معك بطاقة هوية سارية.

